



DASH Тест комплект

За бързо, лесно и надеждно откриване на остатъци от антибиотици



Антибиотичните остатъци в млечните продукти са глобален проблем поради негативните последици от неправилната им употреба.

DASH (Dairy Antibiotics Spore High-throughput) тест комплект е икономично, надеждно и лесно за употреба решение, което подпомага млекопроизводителите в гарантирането на безопасността на млечните продукти и в спазването на изискванията на европейското законодателство.

Тестът използва принципа на микробиологично инхибиране за откриване на най-често срещаните антибиотични остатъци в сурово мляко.

ПРИЛОЖЕНИЕ

DASH тест осигурява качествен скрининг на над 60 антимикробни лекарствени вещества в сурово мляко,

при нива, съответстващи на **максимално допустимите стойности (MRL),** определени от ЕС.

Тестът е **приложим за краве, овче и козе мляко.**

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Технология: микробиологично инхибиране

Матрица: сурово мляко от крави, овце и кози

Обхват: откриване на над 60 антибиотика от 8 групи, включително

β -лактами, тетрациклини, аминогликозиди, сулфонамиди, макролиди, хинолони, хлорамфениколи и линкозамиди

Време за анализ: едноетапен тест с продължителност 135-165 минути при 65°C

Отчитане на резултатите: визуална интерпретация


Формат: 3 плаки с по 96 микрокладенчета всяка




ПРЕДИМСТВА

- Точно и надежно откриване на антибиотични остатъци в мляко
- Лесен за използване метод без предварителна подготовка на пробите
- Висока пропускателна способност и откриване на широк спектър от най-често използваните антибиотици
- Икономически ефективно решение, допринасящо за оптимизиране на разходите
- Съответства на Регламент (ЕО) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологично активните вещества и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите нива на остатъци в храни от животински произход

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА

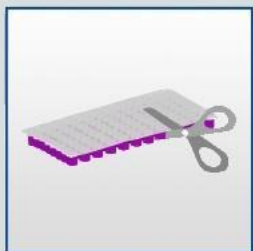


1. Вземете необходимия брой микрокладенчета.

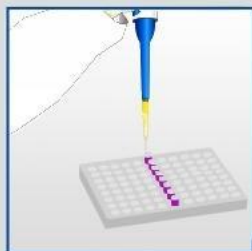

2. Добавете 50 μ L проба мляко във всяко микрокладенче.



3. Инкубирайте за 135–165 минути при 65 °C.

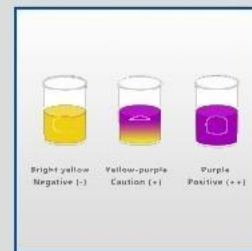

4. Интерпретирайте резултатите според колориметричната карта.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Код на продукта	Наименование	Брой тестове в опаковка
WC0006	DASH тестов комплект	288T



ПАПАЗОВ – НИК ЕООД

ул. Мармарийска 37, сграда „Запад“, вход Г, офис № 1Г
 5000 Велико Търново, България office@papazov-nik.bg
 Тел. +359888234090